


CellaVision® Proficiency Software

Le logiciel CellaVision Proficiency Software est un outil novateur, conçu pour aider les responsables de laboratoire à évaluer, surveiller et promouvoir les compétences du personnel en matière de morphologie cellulaire. Cet outil basé sur une plateforme Web facilite la mise en place d'un processus structuré et efficace d'évaluation et d'amélioration des compétences sans exiger trop de temps, d'efforts ou de ressources.

Mis en oeuvre seul ou combiné aux applications et au matériel CellaVision, le logiciel CellaVision Proficiency Software agit comme une plateforme pour l'amélioration des compétences en morphologie cellulaire. Il facilite également les ambitions et les efforts pour fournir des résultats plus précis et standardisés.

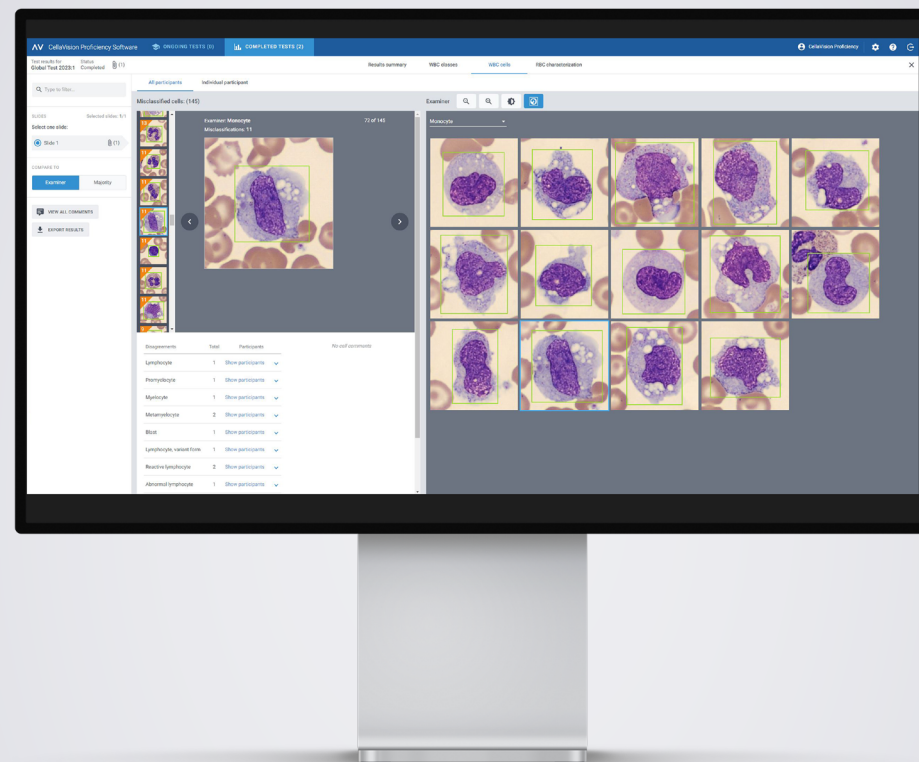

Fonctionnalités

Plateforme Internet avec un accès instantané au navigateur Web en tout lieu

Mécanisme de notification aux participants intégré

Rapport automatisé pour l'examineur


Rapport automatisé fourni aux participants

Comment fonctionne le logiciel ?


- Le logiciel est conçu pour évaluer la capacité des membres du personnel à effectuer les formules sanguines et de liquides biologiques
- L'accès à l'outil basé sur le Web se fait depuis tout ordinateur connecté à Internet, avec une connexion sécurisée aux comptes utilisateurs personnalisés
- L'examineur peut créer des scénarios de test en téléchargeant des frottis numériques soit depuis sa propre base de données CellaVision DM, soit depuis une bibliothèque de lames numériques fournie par CellaVision
- Les participants sont automatiquement informés lorsqu'un nouveau test est disponible et sont chargés d'effectuer les revues sur un ou plusieurs frottis numériques
- Une fois le test terminé, les participants peuvent consulter leurs résultats, comparer leur décompte à celui de l'examineur et à celui effectué par les autres participants
- L'examineur reçoit automatiquement un rapport de performance qui met en évidence les points nécessitant une formation et un approfondissement

Pourquoi choisir CellaVision Proficiency Software ?

- Adapté aux organismes de toutes tailles
- Possibilité d'adapter le logiciel pour explorer les compétences présentant des lacunes ou pour répondre à des besoins et objectifs de formation particuliers
- Les tests sont rapides et faciles à créer et à gérer
- Les tests sont rapides d'accès et faciles à compléter pour les participants
- Compilation automatique des résultats
- Suivi aisé des tests précédents permettant de garder une trace des progrès des participants

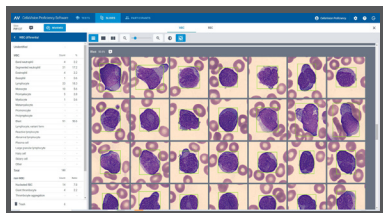

Vue d'une seule galerie de GB

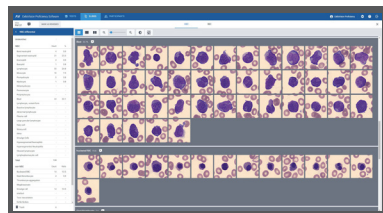

Vue de toutes les galeries de GB

CARACTÉRISTIQUES PC RECOMMANDÉES

- Navigateur: dernière version Google Chrome, Microsoft Edge (basé sur Chromium), Mozilla Firefox, Apple Safari
- 2 Go de RAM
- Bande passante 8 Mo/s
- Résolution de l'écran : 1 920 × 1 080

PRÉ-REQUIS

- Transfer Tool (utilisable uniquement avec la version 4.0 ou supérieure du logiciel CellaVision Remote Review Software)

LICENCES

Plusieurs types de licences sont proposés:

- 10, 30, 50, 70 ou 100 utilisateurs
- 3, 5 ou 7 ans

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Ce produit n'est pas disponible dans tous les pays.