


CellaVision® Proficiency Software

CellaVision Proficiency Software è uno strumento innovativo progettato per aiutare i responsabili di laboratorio a valutare, monitorare e promuovere le competenze del personale nell'area della morfologia cellulare.

Questo strumento, facilita la creazione di un processo strutturato ed efficace per la valutazione delle capacità e la promozione delle competenze senza richiedere troppo tempo, sforzi o risorse.

CellaVision Proficiency Software da solo o utilizzato in combinazione con l'hardware e l'applicazione di supporto CellaVision, si trasforma in una piattaforma perfetta per favorire le competenze nell'area della morfologia cellulare e per contribuire a fornire risultati più accurati e standardizzati

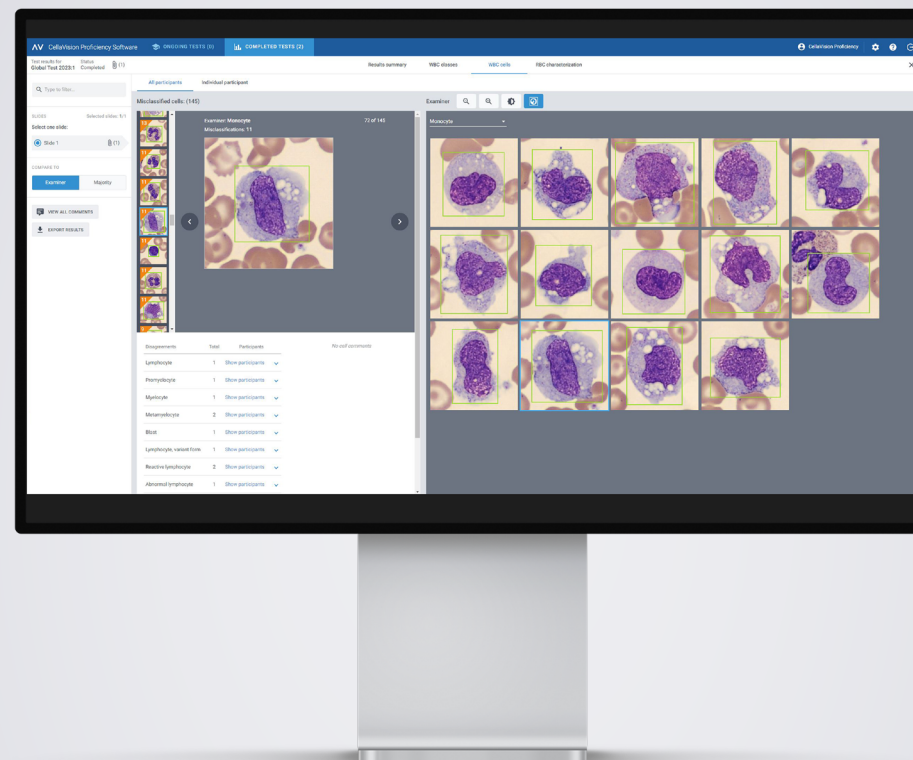

Funzionalità

Si accede dal web, l'accesso al browser web è immediato e può avvenire da qualsiasi luogo

La notifica ai partecipanti è integrata ed automatica

Segnalazione automatica all'esaminatore del risultato


Feedback automatico ai partecipanti

Come funziona?


- Il software è progettato per valutare la capacità del personale operante nell'ambito dell'Ematologia di effettuare la differenziazione delle cellule del sangue e dei fluidi biologici
- Attraverso il Web è possibile l'utilizzo del software da qualsiasi computer connesso a Internet, utilizzando il login sicuro agli account utente personalizzati
- L'esaminatore può creare dei test caricando vetrini digitali con le immagini delle cellule, sia dal proprio database DM CellaVision sia da una libreria di vetrini digitali forniti da CellaVision
- I partecipanti vengono automaticamente avvisati quando è disponibile un nuovo test e viene chiesto loro di eseguire la differenziazione su uno o più vetrini digitali
- Al termine, i partecipanti possono consultare i risultati ottenuti nel test, confrontare la differenziazione calcolata con quello dell'esaminatore e con quello di altri partecipanti
- L'esaminatore riceve automaticamente un rapporto sulle prestazioni che evidenzia in quali aree concentrarsi per la formazione futura e la crescita delle competenze del personale

Perché utilizzare CellaVision Proficiency Software?

- Adatto a organizzazioni di qualsiasi dimensione e formazione
- Può essere personalizzato per approfondire lacune specifiche nelle competenze o soddisfare particolari esigenze e/o obiettivi formativi
- I test sono semplici e veloci da creare e gestire
- I test sono semplici, veloci da aprire e completare per ogni partecipante
- I risultati vengono compilati automaticamente
- È semplice riesaminare i test precedenti per tenere traccia dei progressi dei partecipanti

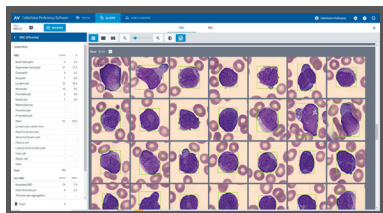

Visualizzazione di tutte le classi WBC

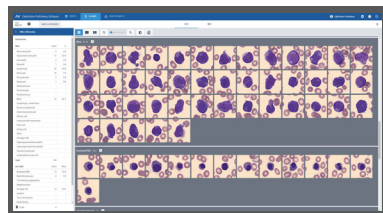

Visualizzazione di una singola classe WBC

SPECIFICHE PC CONSIGLIATE

- Browser: ultima versione di Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium based), Mozilla Firefox, Apple Safari
- 2 GB DI RAM
- Larghezza di banda di 8 Mbps
- Risoluzione dello schermo 1920x1080

SOFTWARE NECESSARI

- Transfer Tool (utilizzabile solo con CellaVision Remote Review Software versione 4.0 o superiore)

LICENZE

È possibile scegliere tra una gamma di opzioni di licenza:

- 10, 30, 50, 70 o 100 utenti
- 3, 5 o 7 anni

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.