


CellaVision® Server Software

CellaVision Server Software è la soluzione per l'ottimizzazione di una rete progettata per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro nelle organizzazioni di grandi dimensioni, sia all'interno di una rete di laboratori HUB e Spoke, sia all'interno di un singolo laboratorio dotato di più analizzatori CellaVision. Il software consente di trasferire facilmente i dati da tutti gli analizzatori collegati a un database centralizzato che risiede su un unico server.

CellaVision Server Software unitamente all'hardware ed alle applicazioni di supporto CellaVision, crea un unico flusso di lavoro semplificato all'interno di una o più sedi, consentendo ai professionisti del laboratorio di lavorare in modo più efficace, di migliorare e velocizzare le revisioni dei preparati.

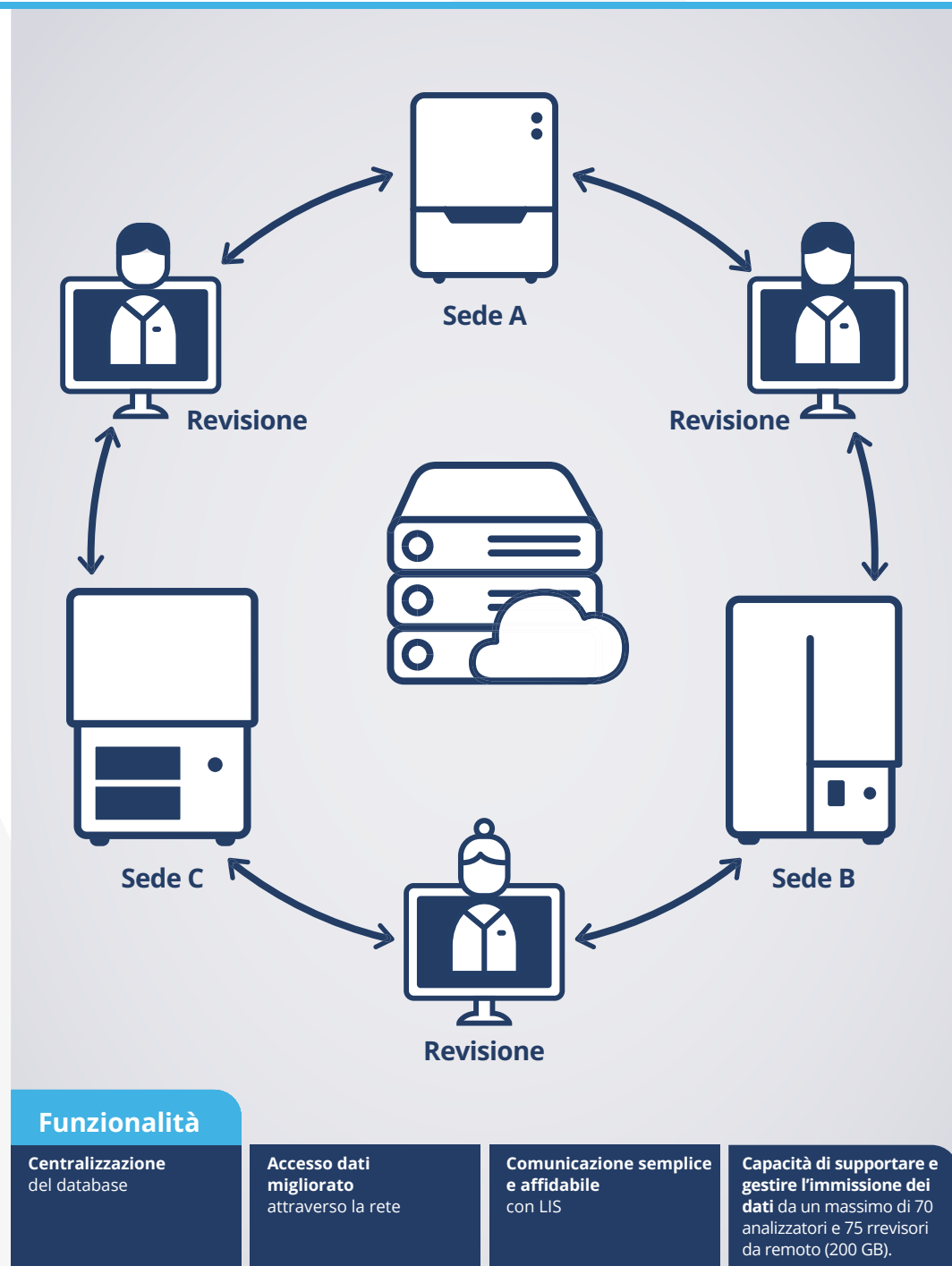

Funzionalità

Centralizzazione del database


Accesso dati migliorato attraverso la rete

Comunicazione semplice e affidabile con LIS

Capacità di supportare e gestire l'immissione dei dati da un massimo di 70 analizzatori e 75 revisori da remoto (200 GB).


Perché utilizzare CellaVision Server Software?

Per le organizzazioni multi-sede/multi-analizzatore, CellaVision Server Software migliora la gestione del flusso di lavoro e di utilizzo delle risorse rendendoli più efficienti, stabilendo al contempo un'architettura IT centralizzata, facile da configurare. Con un unico database condiviso, i vetrini elaborati all'interno della rete possono essere esaminati secondo il loro ordine di ingresso e non è più necessario avere esperti in morfologia in tutte le sedi.

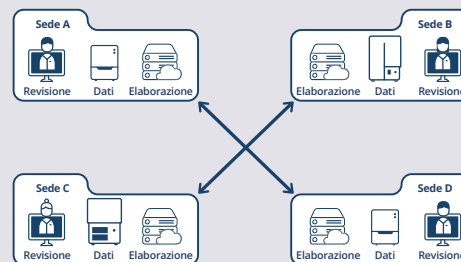

Scenario 1: Connettività senza CellaVision Server Software

In una configurazione standard di CellaVision, il database del flusso di lavoro risiede localmente sui PC collegati agli analizzatori. I singoli database sono accessibili da remoto, ma non è possibile consolidare le liste di lavoro.

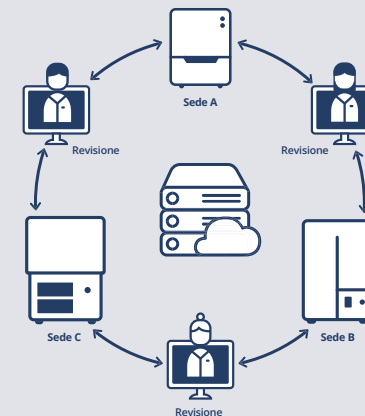

Scenario 2: Connettività con CellaVision Server Software

In una configurazione con CellaVision Server Software, il database del flusso di lavoro risiede su un singolo server condiviso. Tutti gli utenti possono accedere facilmente e i vetrini elaborati all'interno della rete possono essere esaminati secondo l'ordine di ingresso e da qualsiasi operatore.

CellaVision® Server Software

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE SERVER

- Il CellaVision® Server software è supportato su tutti i più recenti sistemi operativi Windows® Server. Per favore Fare riferimento alle nostre Linee guida per la configurazione IT e per ulteriori informazioni specifiche.

PRODOTTI SUPPORTATI

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1
- CellaVision® Remote Review Software

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.