


CellaVision® Server Software

CellaVision Server Software は、提携検査室のネットワークや、複数のDM/DCシリーズを保有する検査室間のネットワークなど、比較的大きな規模の施設でワークフローの効率化を図るために設計されたソフトウェアです。このソフトウェアを使用して、接続されたすべてのDM/DCシリーズから、サーバー上で稼働する中央データベースに簡単にデータを送信することができます。

CellaVision Server SoftwareをDM/DCシリーズおよび対応アプリケーションと併用することにより、検査室内または複数の検査室内で、一つの効率化されたワークフローを構築することができ、検査室での作業がより効率的、機能的になります。

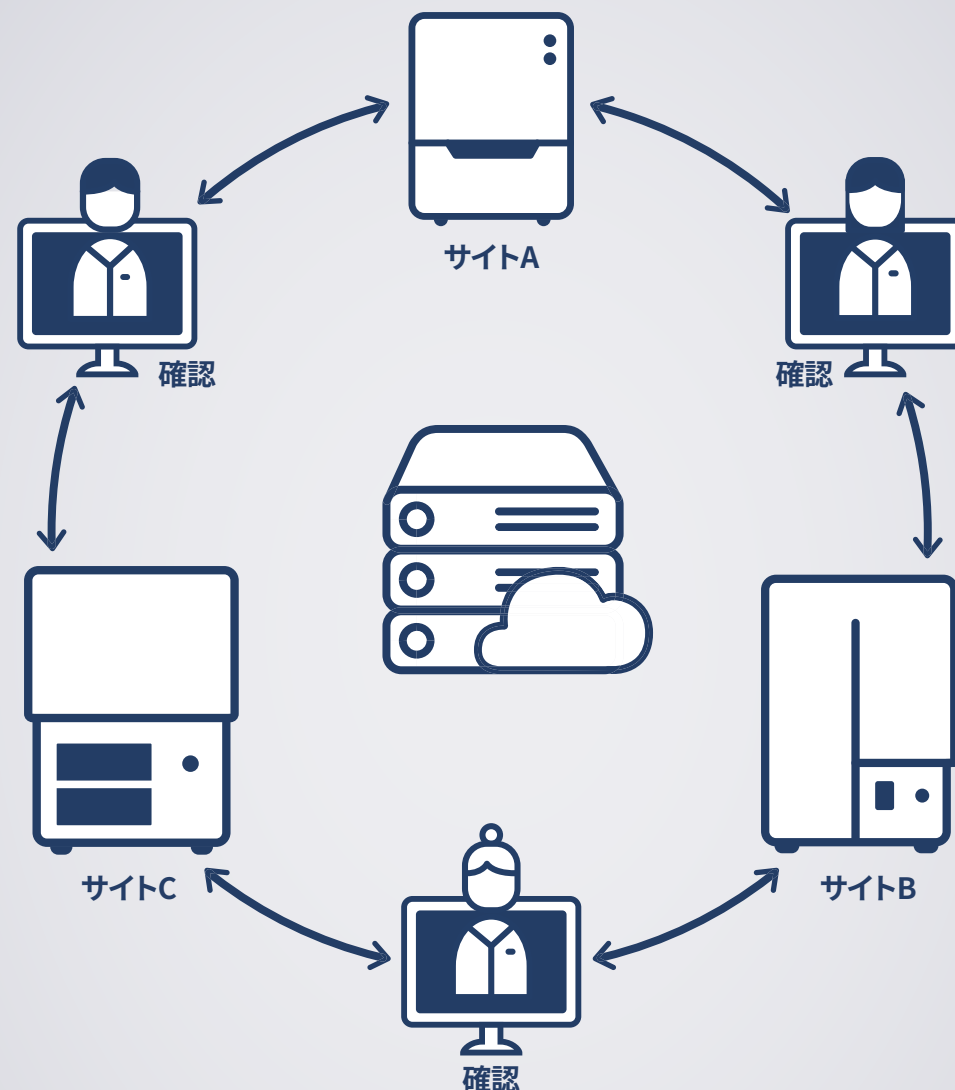

主な特長

データベースの一元化


データベースのネットワークを通じたデータ・アクセスの改善

LISとのシンプルかつ信頼性の高い通信


最大70台のDM/DCシリーズからのデータ入力および75人のリモート・レビューをサポートおよび管理する容量 (200GB)

CellaVision Server Softwareが選ばれる理由

比較的大きな規模の複数サイト/複数アナライザー組織では、CellaVision Server Softwareによって、効率的なワークフロー管理とリソース活用機会が改善される一方で、セットアップおよび管理が容易な、集中型かつ拡張可能なIT構築が可能になります。1つのデータベースが共有されるため、ネットワーク内で処理されたスライドを順に確認することができ、熟練臨床検査技師をすべての検査室に24時間、365日待機させる必要がなくなります。

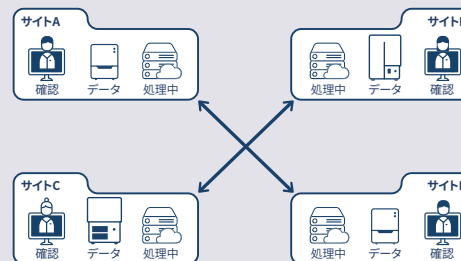

シナリオ 1: CellaVision Server Software を使用しない接続
標準的なCellaVisionのセットアップでは、データベースは、DMシリーズに接続された各々のPCに格納されます。各データベースにリモート・アクセスすることはできますが、各データベースを統合することはできません。

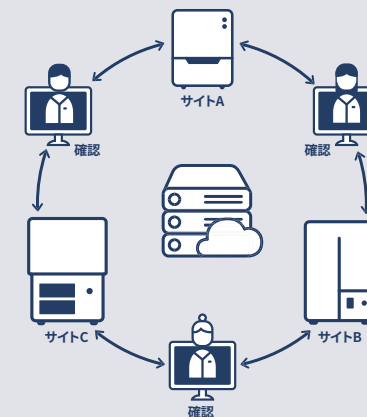

シナリオ 2: CellaVision Server Software を使用する接続
CellaVision Server Software を使用するセットアップでは、ワークフロー・データベースは、単一の共有サーバーに格納されます。全てのユーザーがこのデータベースにアクセスすることができ、ネットワーク内で処理されたスライドを、測定順に確認することができます。

CellaVision® Server Software

技術仕様

サーバーの仕様

- CellaVision server softwareは最新のWindowsでのサーバーオペレーティングシステムでサポートされています。詳細は弊社のITコンフィグレーションガイドラインを参照してください

対応製品

- CellaVision® DM1200
- CellaVision® DM9600
- CellaVision® DC-1
- CellaVision® Remote Review Software

CellaVision

セラビジョン ジャパン株式会社

〒220-0004 横浜市西区北幸 1-11-5 相鉄KSビル9階

Tel. 045-287-0638 Fax. 045-287-0801

仕様は予告なく変更する場合があります。本製品は世界中どこでもお求めになれるとは限りません。